

DNA extraction from liver tissue with Minilys

CONTEXT

Minilys is a small and compact homogenizer for fast and hand-free disruption of a wide range of biological samples prior extraction of DNA, RNA, proteins or drugs. Based on 3D motion bead-beating, Minilys homogenizes, grinds, dissociates samples into 0.5mL, 2mL or 7mL tubes. The mechanical sample prep is compatible with any analysis DNA-RNA electrophoresis, Real time PCR, Western-blot, GC/MS, LC/MS.

In this application, the homogenization of liver tissue to extract DNA is illustrated.

MATERIAL

- Minilys homogenizer
- Precellys kit: 03961-1-010 (1.4 & 2.8 ceramic beads mix).
- peqGOLD Tissue DNA mini Kit
- Samples: 30 mg of liver tissue
- Buffer: 100 µl TE buffer

PROTOCOL

- Minilys: 5000 rpm, 15 sec
- Analysis: total genomic DNA was extracted directly from the homogenized samples using peqGOLD Tissue DNA mini Kit before being checked for quality and quantity using NanoDrop analysis.



Figure 3: homogenized liver samples (vial 1, vial 2, vial 3)

03712-810-DU46 / February 2011



イムス機器株式会社

- 東京
〒162-0805 東京都新宿区矢来町 113 番地 TEL(03)3235-0661(代) FAX(03)3235-0669
- 大阪
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号 TEL(06)6396-0501(代) FAX(06)6395-2588
- 福岡
〒812-0054 福岡市東区馬出 1 丁目 2 番 23 号 TEL(092)631-1012(代) FAX(092)641-1285

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。
 ※本カタログに記載の規格・仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので御了承下さい。

RESULTS

Concentration of DNA obtained from liver tissue after homogenization with Minilys and absorption ratios were determined and shown in the figure 1.

Equivalent total genomic DNA is obtained with Minilys homogenizer. High quality DNA is obtained from all extracted samples.



Figure 1: mean concentration of total genomic DNA from 3 extracted samples of liver tissue with Minilys (run 1 and 2) in comparison with Precellys. The corresponding mean absorption ratios (260/280; 260/230) are also plotted.

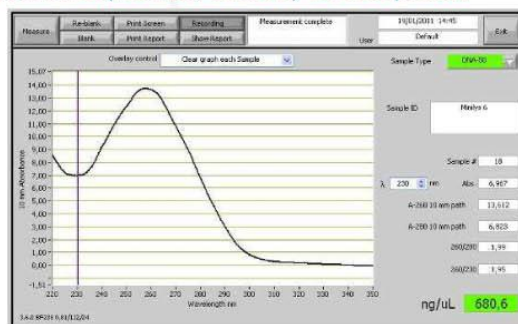


Figure 2: illustration of NanoDrop analysis

CONCLUSION

Equivalent total genomic DNA concentration is obtained with Minilys and Precellys homogenizers.

The Minilys provides the optimal balance of efficiency, speed, ease of use at a low throughput. Minilys enables also cross-contamination free homogenization when compared to grinding with a mortar.

For more details, please contact precellys@bertin.fr



<http://www.technosaurus.co.jp>